

LE TECHNI+

Aussi rapide et efficace que le bec bunsen.
Il peut être utilisé sans aucun problème
sous hotte et pour toutes les manipulations
en espace stérile.



**Stérilisation des anses
de platine**

Stérilisation des cols de verrerie





**Le TECHNI+
permet la réalisation
rapide et aisée,
de Râteaux et Tubes
à Dégagement.**






**Stérilisation des
ANSES DE PLATINE.
Les anses sont
portées au rouge
en quelques secondes.**



**Stérilisation des COLS
DE VERRERIE.**



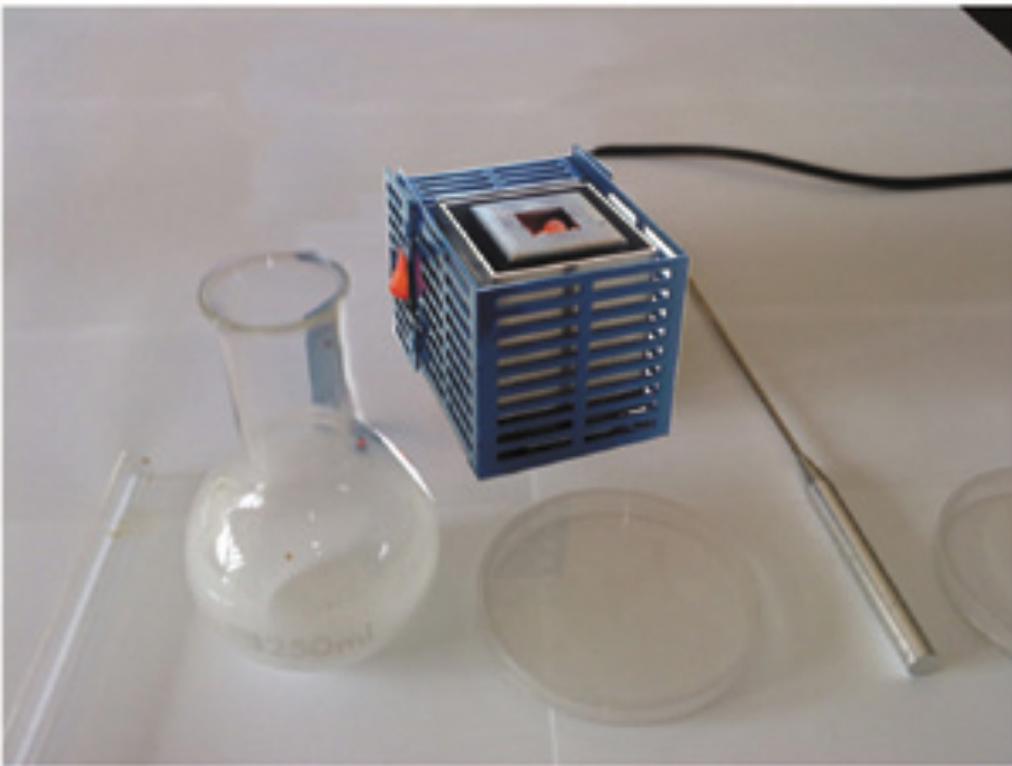

**Création d'un ESPACE
STERILE autour
du TECHNI+**



**Carénage de protection
toujours froid.**





**Le TECHNI+
peut être utilisé
sans aucun
problème sous
hotte
et pour toutes
les manipulations
en espace stérile.**



LE TECHNI+

NOTICE D'UTILISATION

Attention : Vous allez utiliser un appareil HAUTE TEMPERATURE

Respectez impérativement les consignes de sécurité.

- 1 - Poser l'appareil sur une surface stable et plane.**
- 2 - Brancher l'appareil dans une prise secteur 230 Volts avec terre.**
- 3 - Basculer l'interrupteur avec voyant de mise sous tension (Rouge) sur la position ON. Le voyant s'allume. L'appareil est alors en service.**

Attention :

Lors de la première mise en service, il se peut qu'une fumée se dégage de l'appareil. Ceci est normal.

Elle se dissipera après quelques minutes.

CE NON RESPECT D'UTILISATION ENDOMMAGERAIT LES PARTIES INTERNES ET DE CE FAIT ANNULERAIT LA GARANTIE CONSTRUCTEUR.

BREVET DEPOSE

CONFORME AUX NORMES 

LE TECHNI+

BREVET DEPOSE

CONFORME AUX NORMES 

EN CAS DE PANNE :

Si le voyant de mise sous tension ne s'allume pas:

- a) **Basculer l'interrupteur de mise sous tension sur OFF .**
- b) **Débrancher la prise secteur.**
- c) **Changer le fusible.Type : Fusible rapide. 5 ampères.
Haut pouvoir de coupure.250 Volts.**

Mise au rebut des produits en fin de vie



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BREVET DEPOSE

CONFORME AUX NORMES



- **Puissance : 250 W**
- **Secteur : 230 V . 50 HZ**
- **Protection fusible Rapide : F.5A.H.250V**
- **Voyant de mise sous tension : Rouge**



Largeur : 9 cm
Hauteur : 9 cm
Longueur: 12 cm
Poids : 1 kg

GARANTIE DE L'APPAREIL 3 ANS

TECHNI+

BREVET DEPOSE

Carénage de protection toujours froid

Fusible de protection



CONFORME AUX NORMES



700°C



Interrupteur avec voyant de mise sous tension

